

Thinking ahead. Focused on life.



MORITA Campaign

技工編

2025年2月度 モリタキャンペーンのご案内

フルジルコニアクラウン審美性UPキャンペーン.....	2
モリタ技工小器械ご紹介キャンペーン.....	8
ニューダイヤストーン・ニューダイヤロック・Mロック 三菱トレークリーナー Advance.....	14
ご愛顧感謝キャンペーン	

キャンペーンチラシはWEBからでもご覧いただけます

※モリタ友の会にご登録のメールアドレス・パスワードでログインが必要です。



歯科セラミックス用着色材料

NEW! エステティックカララント®

2025年
1月21日
新発売



「エステティックカララント®」3つの特長

- 1 「ノリタケカタナ® ジルコニア」マルチレイヤーシリーズに適した色調設計
- 2 ジルコニア修復物の強度に影響が少ない設計
- 3 シンプルなラインナップ




ジルコニア仮焼体に塗布する着色材料! 焼成前に色付けができます!

ジルコニア焼成後はFCペーストステインを塗布の組み合わせでより高い審美性へ…

単品:各3,400円 ペーシックキット:12色 36,720円 リキッド用筆ペン:1,960円

色調ラインナップ

色調	主用途
A plus	Aシールド系のデンチン色をより濃く調整
B plus	Bシールド系のデンチン色をより濃く調整
C plus	Cシールド系のデンチン色をより濃く調整
D plus	Dシールド系のデンチン色をより濃く調整
BROWN	表面着色、小窩裂溝の暗いブラウン系着色を表現
ORANGE	象牙質先端(マメロン部)の淡いオレンジ系着色を表現
GRAY	先端部の淡いグレー系の透明感を表現
BLUE	先端部の淡いブルー系の透明感を表現
VIOLET	先端部の赤味を帯びたブルー系の透明感を表現
PINK	歯肉部下地の淡いピンク系を表現
WHITE	明度の高い白色不透明感を表現
OPAQUE	彩度のある淡い黄色系の不透明感を表現

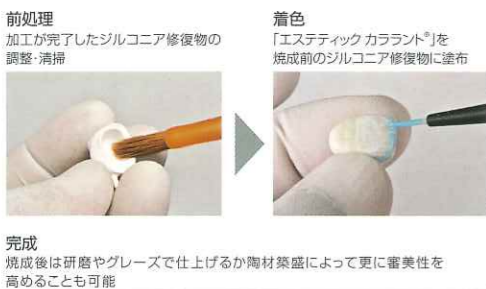

前処理
加工が完了したジルコニア修復物の調整・清掃

着色
「エステティックカララント®」を焼成前のジルコニア修復物に塗布

乾燥
塗布後のジルコニア修復物を80~200℃で30分以上乾燥

焼成
「ノリタケカタナ® ジルコニア」の焼成スケジュールで焼成

完成
焼成後は研磨やグレースで仕上げれば陶材薬盛によって更に審美性を高めることも可能

乾燥不足の場合は、修復物の透光性が十分に得られない、割れや気泡などが発生する。ファースの汚染、それによるジルコニア補綴装置の変色に繋がる可能性があります。



OPAQUE塗布による支台歯の遮蔽効果で支台歯がメタルコア、変色歯の際に有用です!

OPAQUEの塗布による遮蔽効果



支台歯(メタルコア) 「ノリタケカタナ® ジルコニア」YML A2で作製したクラウンを支台歯(メタルコア)に装着した状態 「ノリタケカタナ® ジルコニア」YML A2に、OPAQUEを用いて作製したクラウンを支台歯(メタルコア)に装着した状態



WHITEとOPAQUEの使い方

クラウン内面に使用するのがポイントです

WHITEあるいはOPAQUEをクラウン内面に塗布することにより、支台歯色が遮蔽されます。また、WHITEは、クラウンの明度を向上させることが可能です。



クラウン内面へのOPAQUEの塗布 塗布後 焼成後

WHITEは、一度の塗布で十分な発色が得られます。外側へ塗布する場合には、塗布回数にご注意ください。



<<< 塗布動画はこちら

販売名 エステティックカララント® 一般的名称 歯科セラミックス用着色材料 医療機器認証番号 305AFBZX00084000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
販売名 セラビアンZ®R 一般的名称 歯科用陶材 医療機器認証番号 223AFBZX00161000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン

期間 2025年1月21日~3月19日
数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン」を企画いたしました。期間中 特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



ノリタケカタナ®ジルコニア
YML 14mm A2/A3 2枚パック
標準価格 36,000円×2枚

エステティックカララント®3色
A+ ブルー オペーク
容量 12mL/本
標準価格 3,400円×3本

リキッド用筆ペン 3本
標準価格 1,960円×3本

■標準価格 88,080円 上記詰め合わせて

特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202270984



ノリタケカタナ®ジルコニア
YML 18mm A2/A3 2枚パック
標準価格 38,000円×2枚

エステティックカララント®3色
A+ ブルー オペーク
容量 12mL/本
標準価格 3,400円×3本

リキッド用筆ペン 3本
標準価格 1,960円×3本

■標準価格 92,080円 上記詰め合わせて

特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202270985



ノリタケカタナ®ジルコニア
YML 14mm A2/A3 2枚パック
標準価格 36,000円×2枚

18mm A2/A3 2枚パック
標準価格 38,000円×2枚

エステティックカララント®6色
A+ ブルー オペーク
オレンジ ブラウン グレー
容量 12mL/本
標準価格 3,400円×6本

リキッド用筆ペン 6本
標準価格 1,960円×6本

■標準価格 180,160円 上記詰め合わせて

特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 202270986

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com



足立 成 先生

株式会社カスデンタルサプライ /
カナレテクニカルセンター

クラレノリタケデンタル株式会社
インストラクター
ADTAトレーニングセンター 講師

2009年 愛歯技工専門学校 卒業
2009年 株式会社駿河歯研 勤務
2013年 大阪セラミックトレーニングセンター 修了
2013年 株式会社カスデンタルサプライ /
カナレテクニカルセンター 勤務
2023年 STF Digital Academy 修了

FCペーストステイン レシピ使用色

デンティン色	エナメル色	透明色	強調色	調整色
Cervical 1	Dark Gray	Clea Glaze	Reddish Brown	Black
	Grayish Blue		White	Pink
	Blue			

フルジルコニアクラウンを製作する際、セラビアン®ZR FCペーストステインは、広範囲に塗布してもムラになりにくく、ベースシェードの調整から、細かなキャラクターの付与まで行えるペーストタイプのステイン材です。ステイン材はあくまで表層に用いるため、塗布する量が増えるほど色自体が重なり、自然感に乏しくがちです。

新発売されたエステティックカララント®と組み合わせることにより、内部からの発色が期待でき、ジルコニアをシンタリングした時点でカラードジルコニアの色調を、目標シェードへ近づけることができるため、後のステイン塗布での色調調整に有利となります。

※ステインを塗布した写真ですとわかりづらいため、ステイン1～3までは左がステインを塗布した範囲、右がステインを塗布した写真となっております。

フルジルコニアクラウン



図1 形態修正後、鏡面研磨し、アセトンにて脱脂した状態。
ノリタケカタナジルコニアYML D3

ステイン1

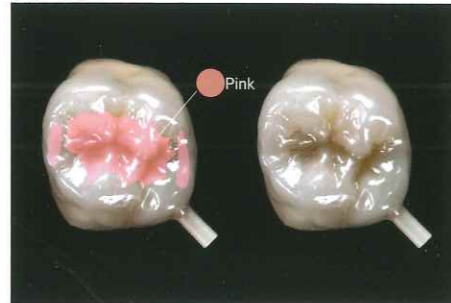


図2 咬合面観
固有咬合面内・辺縁線付近に薄くすらすらPinkを塗布する。

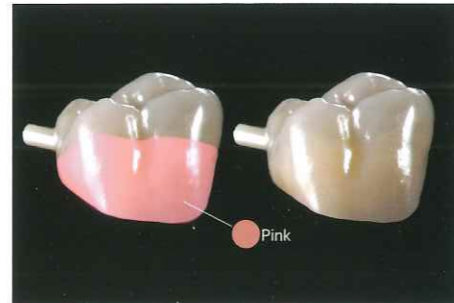


図3 頬側面観
歯頸部から歯冠中央付近まで歯冠全周薄くPinkを塗布し、1度焼成する。(焼成温度810℃、1分20秒係留)

ステイン2

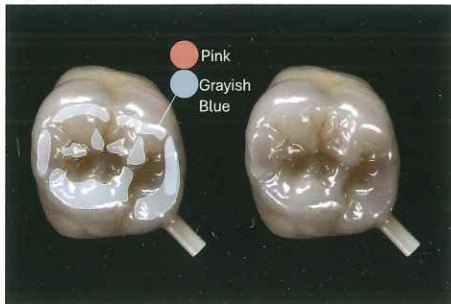


図4 咬合面観
透明感を表現するためにGB:Pを1:1で混和したものを固有咬合面内に薄く塗布する。



図5 頬側面観
咬合面と同じステインを咬頭付近全周・歯頸部隣接1/3付近に塗布する。

ステイン2

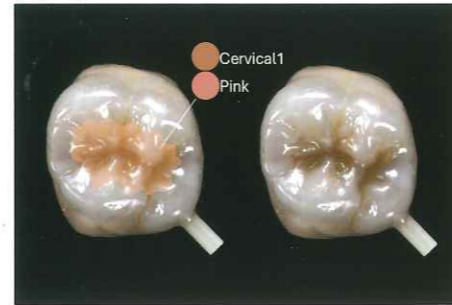


図6 咬合面観
固有咬合面内にCV1:Pを1:0.3で混和したもので彩度を塗布していく。

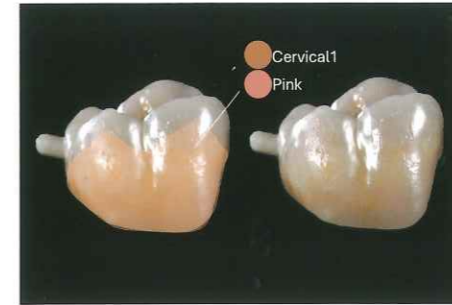


図7 頬側面観
咬合面と同じステインを歯冠全周、歯頸部から咬頭に向かって象牙質風に徐々に薄くなるよう塗布する。ここで1度焼成する。(焼成温度810℃、1分20秒係留)

ステイン3

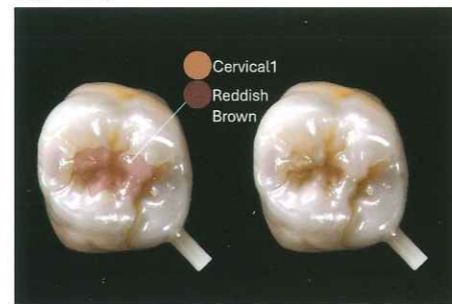


図8 咬合面観
中心窩・近遠心小窩からの立ち上がり付近にCV1:RBを3:1で混和したものを塗布していく。



図9 近心面観
咬合面と同じステインを歯冠全周マージン付近・隣接に塗布する。

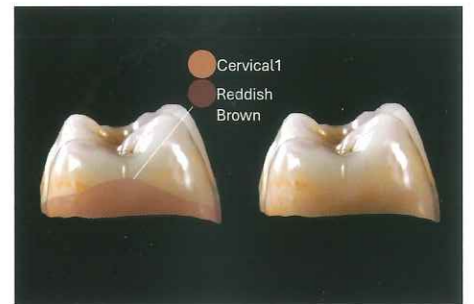


図10 近遠心面観
咬合面と同じステインを歯冠全周マージン付近・隣接に塗布する。

ステイン3

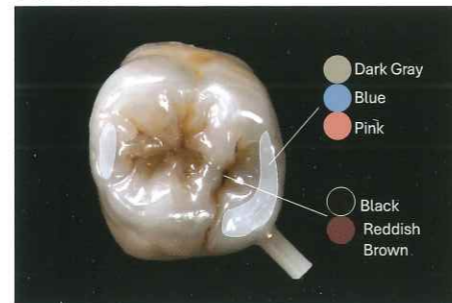


図11 咬合面観
ステイン2で塗布した辺縁線際の透明側にDark Gray:Blue:Pinkを2:1:1で混和したもので強弱をつけ、小窩裂溝にBlack:RBを0.3:1で混和したものを付与していく。

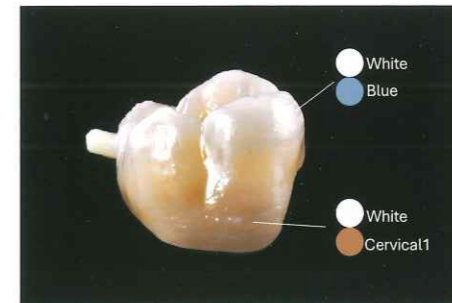


図12 頬側面観
white:Blue(4:1)・White:CV1(4:1)で混和したもので白帯・白濁などのキャラクターを付与する。ここで1度焼成する。(焼成温度810℃、1分20秒係留)

グレース



咬合面・頬側面観:色調確認後、Clear Glazeを塗布し焼成する。(焼成温度810℃、1分20秒係留)最後にシリコンポイントなどで艶の調整をおこない完成。

レシピ内で使用されている陶材のキャンペーン情報は次ページへ!

フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン

期間 数量限定
2025年1月21日~3月19日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「フルジルコニアクラウン 審美性UPキャンペーン」を企画いたしました。期間中 特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



歯科用陶材 セラビアン®ZR FCペーストステイン 単品

■標準価格 各6,500円 202280647
■容量 各5g
■色調 Glaze, Clear Glaze

●販売名 セラビアン®ZR
●一般名 歯科用陶材
●医療機器認証番号 223AFBZX00161000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

■標準価格 各3,900円 202280646
■容量 各3g
■色調 Light Gray, Dark Gray, Grayish Blue, Blue, Cervical 1, Cervical 2, Cervical 3, A+, B+, C+, D+, White, Mamelon Orange 1, Mamelon Orange 2, Earth Brown, Reddish Brown, Value, Black, Green 1, Green 2, Yellow, Salmon Pink, Pink, Red, Fluoro

単品各色を特別価格にてご提供!



歯科用陶材 セラビアン®ZR FCペーストステイン ベーシックキット

■標準価格 32,800円 202280651

■キット内容
5g...Clear Glaze
各3g...Dark Gray, Grayish Blue, Cervical 2, A+, White, Earth Brown, Salmon Pink
FCペーストステイン カラーガイド、ESリキッド

●販売名 セラビアン®ZR
●一般名 歯科用陶材
●医療機器認証番号 223AFBZX00161000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

特別価格にてご提供!

FCペースト
ステイン
色調表

デンティン色	Cervical 1	Light Gray	強調色	White	透明色	Glaze	調整色	Value	Salmon Pink
	Cervical 2	Dark Gray	Mamelon Orange 1	Glaze	Clear Glaze	Black	Black	Black	Pink
	Cervical 3	Grayish Blue	Mamelon Orange 2	Earth Brown		Green 1	Green 1	Green 1	Red
	A+	Blue	Reddish Brown	Fluoro		Green 2	Green 2	Green 2	Fluoro
	B+					Yellow	Yellow	Yellow	
	C+								
	D+								

◆関連WEBセミナーのご紹介◆ まだまだ視聴可能!是非ご視聴ください!

セラビアン®ZR 陶材築盛
達人のベーシックテクニックを学ぶ

南澤先生 CZR基本築盛
無料WEBセミナー

南澤 英樹 先生
株式会社 Dental Lab.SCALA

申込完了後「申込受付メール」が自動配信されます。ドメイン指定受信設定をされている場合は解除をお願いします。

配信期間 2024年8月21日(水)12:00~2025年3月31日(月) 23:59まで

開催場所 オンライン開催です。ネット環境が整った場所でしたらどこでも参加可能です。

参加費 無料

お申し込みはWEBからお申込みください。

株式会社モリタ セールスプロモーション部3グループ
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL 03-3834-6164 FAX 03-3834-4076

株式会社モリタ セールスプロモーション部3グループ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL 06-6380-7241 FAX 06-6380-0941

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中もキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800. 222 8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com

Thinking ahead. Focused on life.



歯科技工用ポーセレン焼成炉

Cerafusion NX

セラフュージョン NX

- 炉内均熱性に優れた石英管マッフルを採用
- 炉内乾燥、炉内徐冷が設定可能で用途に合わせた多彩な焼成が可能
- 場所を取らないスリムなボディ
- セパレートタイプの大型カラーディスプレイ
- わかりやすい日本語表記

焼成プログラム:「ポーセレン焼成」プログラム 600
販売名: セラフュージョン NX
一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号: 25B2X10003000009
標準価格: 979,000円(消費税別) 2024年10月21日現在

歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器

Cerafusion PRESS

セラフュージョン PRESS

- プレス&ポーセレン焼成が可能な高性能版ファーンレス
- 炉内均熱性に優れた石英管マッフルを採用
- 日本語表示のタッチ式大型アインチカラーディスプレイ
- リアルタイムでプレス工程やプレス速度、圧力などわかりやすく表示
- 自動プレス停止判定機能により良質なプレス体を得ることが可能

焼成プログラム:「プレス」プログラム 120 「ポーセレン焼成」プログラム 600
販売名: セラフュージョン PRESS
一般的名称: 歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)
医療機器届出番号: 25B2X10003000010
標準価格: 1,149,000円(消費税別) 2024年10月21日現在

●ご使用に際しましては、製品の添付文書および取扱説明書を必ずお読みください。●仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製造販売 SKメディカル電子株式会社 〒526-0817 滋賀県栗原市七条町305-1
発売 株式会社 モリタ 大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター(歯科医療従事者様専用) T 0800. 222 8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com



製品紹介ページ

モリタ技工小器械 ご紹介キャンペーン

【実施期間】 2025.1/21~3/19 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『モリタ技工小器械ご紹介キャンペーン』を企画いたしました。
期間中、下記技工小器械を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



模型製作



製品の紹介ページも
ぜひご覧ください。

歯科技工用真空攪拌器

バキュームミキサー VM115

標準価格 191,900円 201030350

特別価格にてご提供!

羽根の清掃性や練和性、メモリー機能など操作性を追求した技工用真空攪拌器

効率的な作業性と練和性を追求したエアバキューム式真空攪拌器。攪拌ボウルと羽根の間に適切なクリアランスを設けることで、練和性を向上しました。スイッチも少なく操作性にも配慮されたシンプルなデザインです。また、攪拌中の音は静音設計により約50dBにおさえられ、静音化を実現しています。



機能性を追求したシンプルな攪拌羽根



シンプルで使いやすい操作パネル

●販売名 バキュームミキサー VM115
●一般名 歯科技工用真空攪拌器
●医療機器届出番号 11B2X00071000034
●通常機器の分類 一般医療機器(クラスI)
製造販売 株式会社モリタ東京製作所



製品の紹介ページも
ぜひご覧ください。

歯科技工用トリマー

モデルトリマー MT10

標準価格 162,700円 201030215

ダイヤトリマー MT10D

標準価格 210,400円 201030216


特別価格にてご提供!

切削作業もメンテナンスもスムーズに

砥石面と作業テーブル下へ注水を行うことで、砥石の目詰まりや粉塵の蓄積を同時に防ぎます。細かい切削作業を妨げないだけでなく、使用前後のメンテナンスもスムーズです。



砥石の目詰まりや水の飛散を低減

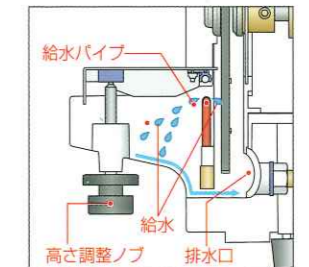

作業テーブル下の切削粉の付着を防ぐ



メンテナンスしやすい着脱式

●販売名 モデルトリマー MT10
●一般名 歯科技工用トリマー
●医療機器届出番号 11B2X00071000036
●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
●販売名 ダイヤトリマー MT10D
●一般名 歯科技工用トリマー
●医療機器届出番号 11B2X00071000036
●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 株式会社モリタ東京製作所

ファーンレス (リングファーンレス、リバーナー)



歯科技工用リング焼却炉
リングファーンレスTMF 501

標準価格 423,300円 201030870

特別価格にてご提供!

リングファーンレスのスタンダード
700℃約10分の急速加熱、デジタル制御、12種類のプログラムを内蔵し、大幅に機能アップしました。



操作性と視認性に優れた液晶操作パネル

プログラム設定、設定内容変更などはLCD表示部を見ながら、アップダウンスイッチを押すだけの簡単操作です。また、炉内温度、昇温速度、焼却達成率などをリアルタイムに1画面で表示するので、ひと目で焼却状況を確認できます。

- 販売名 リングファーンレスTMF-501
- 一般的名称 歯科技工用リング焼却炉
- 医療機器届出番号 13B2X00051000007
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 埼玉電気材料株式会社
- 販売 株式会社モリタ東京製作所

リングファーンレス用リバーナー
TMR 201(リバーナー)

標準価格 114,300円 201030872

特別価格にてご提供!

白金スーパーハニカム、白金セラミックボール触媒の併用により、リング焼却時に発生する未燃焼ガスを消臭分解します。



リングファーンレス用リバーナー

AIR GUARD SP

標準価格 123,000円 202230625

特別価格にてご提供!

有毒ガスを効率よく分解。
ecoでクリーンな技工環境で作業できます。



歯科技工用リング焼却炉
**フルオート
リングファーンレス
SRF 900**

標準価格 336,000円 202230635

特別価格にてご提供!

10分程度で700℃まで急速昇温でき、3ステージの焼却スケジュールを10種類記憶。その他多様な機能で作業効率をアップできるフルオートリングファーンレスです。



HSプログラム(ヒートショック用)

係留温度のみを設定する簡易なプログラムモードです。設定した係留温度までフルパワーで昇温、係留します。※HS 1、又はHS 2の2種類設定ができます

- 販売名 フルオートリングファーンレス SRF 900
- 一般的名称 歯科技工用リング焼却炉
- 医療機器届出番号 25B2X10003000015
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

鑄造



歯科技工用鑄造器関連器具

J.M.横型遠心鑄造器(CM-30)

標準価格 183,010円 201030430

特別価格にてご提供!

鑄造性・耐久性・操作性・メンテナンス性・経済性を重視したシンプルな設計の横型遠心鑄造器です。

- 販売名 J.M.横型遠心鑄造器(CM-30)
- 一般的名称 歯科技工用鑄造器関連器具
- 医療機器届出番号 11B2X00071000015
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 株式会社モリタ東京製作所

鑄造 (高周波鑄造機)




歯科技工用高周波鑄造器

サーモトロールⅢ

標準価格 1,769,000円 202230530

特別価格にてご提供!

- 7段階のトルク設定が可能で、金属の種類や症例により回転スピードを選択可能
- HIモードとLOモードにより融解パワーのコントロールが可能
- 銀合金からコバルトまで幅広い金属に対応
- 200V 単相25A以上

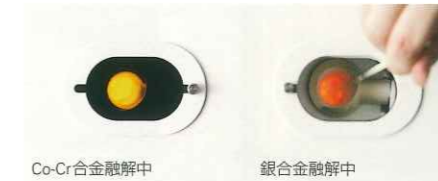

- 販売名 サーモトロールⅢ
- 一般的名称 歯科技工用高周波鑄造器
- 医療機器届出番号 25B2X10003000013
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社



Co-Crによる金属床 Co-Crによるバー・クラスプ Pd合金によるブリッジ・ラウン・インレー 銀合金によるメタルコア



高周波吸引加圧鑄造器


エアロマーズSV

標準価格 1,959,000円 202230675

特別価格にてご提供!

高周波で幅広い金属・症例に対応

- 高周波による高速昇温が可能で、銀合金〜コバルトクロムまで幅広く対応!
- 金属床からクラウン・ブリッジまで幅広く対応!
- アルゴンガスとの接続対応も可能

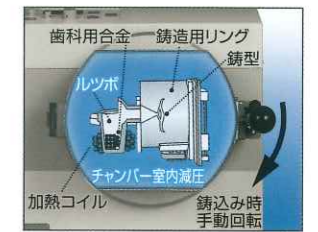

金属融解時

例(Co-Cr合金) ※金属・症例によって鑄造タイミングは異なります。



- 販売名 エアロマーズSV
- 一般的名称 歯科技工用高周波鑄造器
- 医療機器届出番号 25B2X10003000007
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

サンドブラスト



歯科用研磨器材

ジェットブラスト 100S(サンドブラスト)

標準価格 225,000円 202230340

特別価格にてご提供!

- 販売名 ジェットブラスト 100S
- 一般的名称 歯科用研磨器材
- 医療機器届出番号 25B2X10003000019
- 医療機器の分類 一般C1
- 製造販売 SKメディカル電子株式会社

4,500ルクスで明るくメンテナンス性を考慮した



チューブの接続部分はワンタッチタイプを採用しているため、簡単にペンシル交換が行えます。研磨材の交換とタンクの清掃 研磨材の交換やタンク内の清掃を簡単に。本体からタンクの取り外しができます。



詳しい製品紹介はこちら

ファーンズ (ポーセレンファーンズ/シンタリングファーンズ)



セラフュージョンNX

標準価格 979,000円 202230080

特別価格にてご提供!

ポーセレンファーンズシリーズ累計販売台数
23,000台突破
炉内均熱性に優れた石英管マッフルを使用

- 販売名 セラフュージョンNX
- 一般的名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉
- 医療機器届出番号 25B2X1000300000
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



スーパーポンプFD

標準価格 137,000円 202230380

特別価格にてご提供!



自動プレス停止判定プログラム



適度なプレスはプレス体の失敗のもととなります。セラフュージョンPRESSは、プラジャーを押し込んだ際に進むスピードを監視し、設定された速度より遅くなると自動的に停止する自動プレス判定機能を備えています。また、症例に応じてプレス停止の速度や時間、プレス圧力など設定変更も可能です。

セラフュージョンPRESS

標準価格 1,149,000円 202230100

特別価格にてご提供!

陶材焼成、ガラスセラミック兼用器
自動停止判定プログラムで設定された
速度より遅くなると自動で停止します。

- 販売名 セラフュージョンPRESS
- 一般的名称 歯科技工用セラミック加熱加圧成形器
- 医療機器届出番号 25B2X10003000010
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 SKメディカル電子株式会社

ノリタケカタナ F-2 N

標準価格 1,698,000円 202270444

特別価格にてご提供!

短時間焼成に対応したジルコニア用シンタリングファーンズ



単冠~3本ブリッジ約90分~の焼成を
実現
熱衝撃に強い短時間焼成用のファイバー
製サヤを採用しました。

常時最高1600℃で使用可能
常時最高1600℃の高温で使用可能な
MoSi2ヒーターと熱電対を採用。

ロングスパンブリッジの焼成が可能
ロングスパンブリッジの収納が可能な内
径φ96mmの焼成サヤを採用しています。

- 販売名 ノリタケカタナ F-2 N
- 一般的名称 歯科技工用ポーセレン焼成炉
- 医療機器届出番号 25B2X10003000014
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 SKメディカル電子株式会社

補綴物・義歯研磨

ラボラトリーレーズ(LL4)

標準価格 138,400円 201030317

特別価格にてご提供!

安定した強力モーターでらくに研磨でき、また、
0~10,000min¹の無段変速で研磨作業にマッチ
したスピード選択が可能です。

- 販売名 ラボラトリーレーズ(LL4)
- 一般的名称 歯科技工用電気レーズ
- 医療機器届出番号 11B2X00071000046
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 株式会社モリタ東京製作所

別売品
●ディスクホルダー 右用、左用
●バーホルダー 右用、左用(φ2.35、φ3.0、φ6.0)



義歯作製

油圧フラスコプレス(FP7)

標準価格 197,800円 201030209

特別価格にてご提供!

簡単・スピーディにフラスコを約2トンで加圧、
デンチャー製作の強い味方。

- 販売名 油圧フラスコプレス (FP7)
- 一般的名称 歯科技工用プレス
- 医療機器届出番号 11B2X00071000016
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 株式会社モリタ東京製作所



光重合器



製品の動画紹介ページも
ぜひご覧ください。

αライトV


標準価格 386,810円 201030770

特別価格にてご提供!

広い重合室に、ハイパワーLEDを搭載

咬合器ごと入る広い重合室に、ハイパワーのLEDを48ヶ所に搭載。

LEDランプを採用したことにより、低消費電力、長寿命を実現しながらもしっかりとした光重合が可能です。

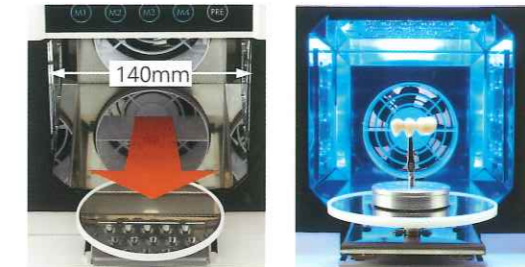

咬合器ごと入る広い重合室。ハイパワーLEDを採用したことにより、
模型を取り出しやすいターンテーブル! 重合時間が短縮!

- 販売名 アルファライトV
- 一般的名称 歯科技工用重合器
- 医療機器届出番号 11B2X00071000027
- 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

製造販売 株式会社モリタ東京製作所

ご注文書

モリタ技工小器械ご紹介キャンペーン [実施期間] 2025.1/21~3/19 **数量限定**

商品名	品目コード	標準価格	キャンペーン価格	数量
バキュームミキサー VM115	201030350	191,900円	特別価格	
モデルトリマー MT10	201030215	162,700円		
ダイヤトリマー MT10D	201030216	210,400円		
リングファーンズ TMF-501	201030870	423,300円		
TMR 201(リバーナー)	201030872	114,300円		
フルオートリングファーンズSRF 900	202230635	336,000円		
AIR GUARD SP	202230625	123,000円		
ノリタケカタナF-2N	202270444	1,698,000円		
J.M. 横型遠心铸造器 (CM-30)	201030430	183,010円		
エアロマーズSV	202230675	1,959,000円		
サーモトロールⅢ	202230530	1,769,000円		
セラフュージョン NX	202230080	979,000円		
セラフュージョン PRESS	202230100	1,149,000円		
スーパーポンプ FD	202230380	137,000円		
ジェットブラスト100S(サンドブラスト)	202230340	225,000円		
ラボラトリーレーズ(LL4)	201030317	138,400円		
油圧フラスコプレス (FP7)	201030209	197,800円		
αライトV	201030770	386,810円		

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

お名前

貴院名または
歯科技工所名

ご住所

お出入りのディーラー名

[製造販売会社住所一覧]

SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1
城田電気炉材株式会社 東京都中野区若宮2-55-3
株式会社モリタ 大阪府吹田市垂水町3-33-18
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室7129

発売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525

東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)

www.dental-plaza.com

1986年から改良を重ねた
高品質な日本製

38年の信頼と実績

ニューダイヤストーン・ニューダイヤロック・Mロック 三菱トレーナー Advance

ご愛顧感謝キャンペーン [実施期間] 数量限定 **2025.1.21~2.20**

ニューダイヤストーン 各種

ニューダイヤストーン ノーマル 各印象材に幅広く適合

	標準価格	テンダーオレンジ	イエロー	ホワイト	ブルー	ナチュラルグレイ
3kgシンブルパック	3,400円	202330001	202330002	202330003	202330004	202330005
18kg缶	17,100円	202330020	202330021	202330022	-	-
18kg段ボール	16,500円	202330080	202330081	202330082	-	-
1.5kg×12入ダンボール	17,700円	202330090	202330091	202330092	-	-

ニューダイヤストーン ファースト 硬化時間はわずか5分で操作性アップ
標準価格 3kgシンブルパック パステルオレンジ 3,400円 202330030

ニューダイヤストーン ダストフリー 粉末飛散を極力カットしクリーンな環境
標準価格 3kgシンブルパック イエロー 3,650円 202330035



歯科用超硬石膏

ニューダイヤロック

●低混水量でも硬石膏並みの練和感 ●高い強度と低膨張率



標準価格
3kgシンブルパック グリーン 4,100円 202330039
メロウブラウン 4,100円 202330040

歯科用超硬石膏

Mロック

超硬石膏に求められる物性・操作性を兼ねそろえ、コストパフォーマンスに優れています。



標準価格
3kg ピーチ 3,100円 202330110

アルギン酸塩印象材専用剥離材

三菱トレーナー Advance

印象体を溶かさずに柔らかくして剥がせます。
6倍希釈(1本で6L作れます)

内容 三菱トレーナー Advance 1000mL
標準価格 9,300円 202330223



三菱トレーナー Advance 専用浸漬容器

標準価格 1,700円 202330224
専用浸漬容器をお使いいただけますと、6倍希釈(水5:Advance1)を簡単に、正しい倍率でご使用できます。



それぞれ
特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
販売名 ニューダイヤストーン 一般的名称 歯科用硬質石膏 医療機器届出番号 2483X00001000002 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 ニューダイヤストーン ダストフリー 一般的名称 歯科用硬質石膏 医療機器届出番号 2483X00001000004 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 ニューダイヤロック 一般的名称 歯科用硬質石膏 医療機器届出番号 2483X00001000005 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 Mロック 一般的名称 歯科用硬質石膏 医療機器届出番号 2483X00001000011 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
製造販売 株式会社モリタ 三重県四日市市富士町1-150

平素は格別のご愛顧を賜り有難うございます。この度日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めましてご愛顧感謝キャンペーンを企画いたしました。期間中、対象品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会にご利用ください。

その印象体、一晩かけてドロドロに溶かしていませんか?



固まりを取り除いてから浸漬へ

印象体を溶かさず柔らかくするので
実用液が濁りません!

三菱
トレーナー
Advanceなら!



※お使いの印象材によっては、液交換近くで実用液が濁る事があります。その際は新液に交換してください。



そういえば・・・
ドロドロした液を
頻りに替える
手間とコストが
かかっているな・・・
配管のニオイも
気になる・・・

さらに
廃液クリーンで
配管が詰まらない!

6倍希釈だから経済的!

トレーが錆びにくく長持ち!

などメリットいろいろ!

短時間浸漬で、
その日のうちに清掃完了!



関連製品

歯科用アルギン酸塩印象材
アルフレックス ダストフリー 汎用タイプ
ノーマルセット 1kg×5SP 標準価格 23,100円
ファストセット 1kg×5SP 204510200F~204510200N



販売名 アルフレックス ダストフリー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器届出番号 218AFBZX00089000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッソン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

歯科用アルギン酸塩印象材
アルフレックス デンチャー 鋭利印象材
におすすめ!
粉末 1kg 標準価格 5,300円 204510201



販売名 アルフレックス デンチャー
一般的名称 歯科用アルギン酸塩印象材
医療機器届出番号 218AFBZX00051000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社ニッソン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

石膏印象材保管容器
ゆかちゃんBOX

PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。



標準価格 3,650円 202330061

製造販売 株式会社モリタ 三重県四日市市富士町1-150

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com